

OLYMPIA SERIES

GENERATORE DI AZOTO

AD ALTA CAPACITA'

N70-1



Silently powerful

ADATTO PER: INSTALLAZIONE SINGOLA O MULTIPLA
DI LCMS, SAMPLE PREPARATION E TUTTI GLI ANALIZZATORI
CHE RICHIEDONO AZOTO SECCO

VELOCITA' VARIABILE

Regolazione automatica della velocità proporzionale al flusso erogato



SILENZIOSO

Dotato di speciali soluzioni di insonorizzazione e anti-vibrazione, perfetto per il laboratorio



RISPARMIO ENERGETICO

Consumo energetico ridotto del 30%* grazie ad un sofisticato software di ottimizzazione



BASSI COSTI DI MANUTENZIONE

Manutenzione limitata per via della bassa temperatura di esercizio, minor stress del motore




TECNOLOGICO

Generatore con tecnologia "Scroll" ed essiccatore a membrana built-in



*rispetto ad un sistema equivalente

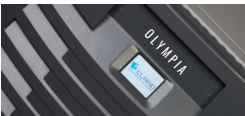

CONTROLLO DA REMOTO


Collegamento da remoto da qualsiasi dispositivo tramite la piattaforma IoT Claind4You




OPTIONALS



KIT TRASFERIMENTO ARIA CALDA
Codice 433.30.Z000

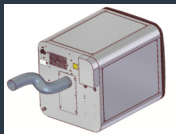

KIT SERBATOIO 100 L
Codice 250.30.B116

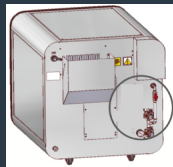

GRUPPO REGOLATORE DI PRESSIONE
DOPPIO
Codice 433.30.Z210.00

PRODOTTI CORRELATI...

OLYMPIA SERIES
OIL FREE COMPRESSED
AIR GENERATOR
A200-1



ADATTO PER: LCMS, ARIA COMPRESSA
PER LABORATORIO, GC-TOC, ASSORBIMENTO
ATOMICO E TUTTI GLI ANALIZZATORI CHE
RICHIEDONO ARIA SECCA OIL-FREE

OLYMPIA SERIES
NITROGEN AND DRY AIR
GENERATOR
AN 60-1



ADATTO PER: INSTALLAZIONE SINGOLA O
MULTIPLA DI LCMS, MP-AESE TUTTI GLI
ANALIZZATORI CHE RICHIEDONO ARIA SECCA
OIL-FREE.



SCHEDA TECNICA

CODICE PRODOTTO	433.30.0010.00
PORTATA	Fino a 80 NI/min
TECNOLOGIA ARIA COMPRESSA	Compressore SCROLL Oil-free
OUTPUT PRESSURE	6 ÷ 9,5 bar
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230 Vac ± 10% 50/60Hz 2,5kW
INDICE DI PROTEZIONE	IP20
RUMORE	Minimo: 54 dBA Medio: 58 dBA
TEMPERATURA OPERATIVA	5°C - 40°C/40°F - 100°F
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	5°C - 50°C/40°F - 125°F
UMIDITA' AMBIENTALE	max 90% senza condensa
ALTITUDINE MASSIMA	Testato fino a 2000 m slm
DIMENSIONI	L x D x H cm 68 x 83 x 79,5 27,8" x 32,5" x 31,5"
PESO	155 kg/330 lbs
DISPERSIONE DI CALORE	2340 J/sec
COLLEGAMENTI PNEUMATICI	Uscita azoto G 1/2" femmina; scarico drenaggio condensa Tubo PVC Øe 9 mm e tanica di raccolta
COLLEGAMENTI ELETTRICI	Cavo alimentazione mt 5; spina volante IEC309, 2 poli più terra blu 32A IP44 secondo norme IEC 60309-1 ed IEC 60309-2
CONNETTORE DATI	Protocollo di comunicazione dati Ethernet MQTTS, MOD- BUS; Cavo RJ45 - WiFi
GARANZIA	2 anni dalla Consegna





1979

IL NOSTRO ANNO
DI FONDAZIONE



3.000

I NOSTRI CLIENTI
A LIVELLO GLOBALE



24.000

LE NOSTRE INSTALLAZIONI
IN TUTTO IL MONDO



32

PAESI SEGUITI
A LIVELLO GLOBALE

SERVIZI

- ESTENSIONE DI GARANZIA
- CONTRATTI DI MANUTENZIONE E FULL-RISK
- CERTIFICAZIONI IQ/OQ
- ANALISI PUREZZA/QUALITA' DEL GAS IN SITU
- LOCAZIONE OPERATIVA
- CLAIIND4YOU

Visita il nostro sito www.claiind.it o
chiamaci al **+39 0344 56603**

HEADQUARTER:

Via Regina 24
22016 Tremezzina
Loc. Lenno (CO)
Italy

info@claiind.it



CLAIIND

GAS GENERATORS AND PURIFIERS